

Especificação técnica

Peso	145 kg (sem vaporizador e cilindro)
Dimensões	1410 (A) × 945 (L) × 690 (P) mm
Tela	Tela sensível ao toque colorida de 10,4 polegadas
Fonte de alimentação	100-240 V, 50/60 Hz
Bateria reserva	90 min (uma bateria), 240 min (duas baterias)
Suprimento de gás	O ₂ + N ₂ O, O ₂ +Ar, O ₂ + N ₂ O+Ar
Jugos de cilindro reserva	Opc, máximo 3
Medidor de vazão	Tubos duplos, Ar/O ₂ : 0-1 L/min, 1-15 L/min, N ₂ O: 0-1 L/min, 1-10 L/min
Descarga de oxigênio	25~75 L/min
Recipiente de CO ₂	1,5 L
Posição do nebulizador	1 ou 2
Sistema de montagem do nebulizador	Selectatec com função de intertravamento
Medidor de pressão	-20 cm H ₂ O-100 cm H ₂ O
Ventilador	Controle eletrônico
Modo de ventilação	VCV, PCV, Espontâneo, Manual, SIMV (opc.), PSV (opc.), PCV-VG (opc.)
Volume de corrente	20-1500 ml (modo de volume), 5-1500 ml (modo de pressão, PCV-VG)
Parâmetro do monitor	Volume de corrente, concentração de O ₂ , pressão das vias aéreas, frequência respiratória, volume minuto, PEEP
Forma de onda	P-T, F-T, V-T
Alarme	Baixa pressão das vias aéreas, alta pressão das vias aéreas, alarme de falha de oxigênio, alarme de apneia, alarme de taxa de respiração, concentração de O ₂
Tendência	Até 48 horas
Sensor de oxigênio	Opc.
Monitoramento de CO ₂	Opc., fluxo lateral, fluxo principal ou microfluxo
Monitoramento de gás anestésico	Opc.
ACGO	Opc.
AGSS	Opc., passivo ou ativo
Gaveta	3



 | Pesquisar na Mindray Animal Medical

www.mindrayanimal.com
service@mindrayanimal.com

P/N: PT-BR-WATO EX-35Vet-210285X4P-20220518
©2022 Shenzhen Mindray Animal Medical Technology Co., LTD. Todos los derechos reservados.



WATO EX-35Vet

Estação de anestesia

Solução anestésica inalatória completamente automática para uso veterinário




Segurança melhorada

Empregando as tecnologias mais recentes, a WATO EX-35Vet oferece suporte a uma ampla gama de recursos e funcionalidades, garantindo que todos os procedimentos anestésicos para os animais sejam executados com segurança, eficiência e eficácia.

Ventilador veterinário preciso

A WATO EX-35Vet suporta uma gama completa de modos controlados e de suporte de ventilação com compensação dinâmica do volume de corrente de no mínimo 5 ml.

O modo de ventilação inteligente PCV-VG combina as vantagens do modo de controle de volume e modo de controle de pressão, não só para garantir a precisão do volume, mas também para evitar lesões pulmonares nos animais.

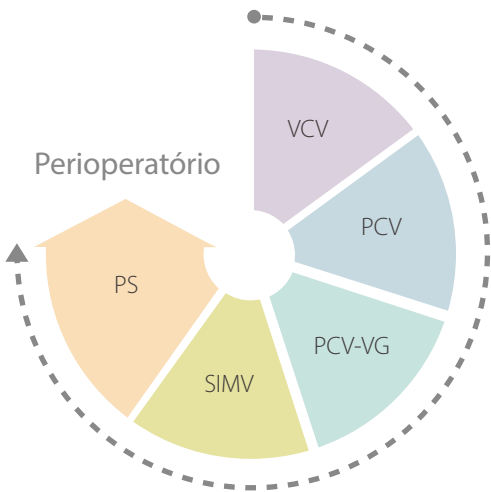

Monitoramento fisiológico extensivo

Com a WATO EX-35Vet, o estado fisiológico do animal pode ser obtido de forma fácil, garantindo, claro, a segurança do animal durante a cirurgia.

- 3 formas de onda são exibidas simultaneamente
- Parâmetros de monitoramento, incluindo pressão das vias aéreas, volume de corrente, frequência respiratória, volume por minuto etc
- Módulo de CO₂ pronto para usar ou módulo de agente anestésico



Aplicação estável de anestésico

A compensação automática de fluxo/temperatura/pressão do Vaporizador V60 garante uma saída constante e uma concentração precisa de agentes anestésicos, mesmo em diferentes condições ambientais.

- Aprovado pela CE e FDA
- Design livre de manutenção
- Testes de qualidade rigorosos



Maior capacidade de uso

A WATO EX-35Vet foi desenvolvida para facilitar o seu fluxo de trabalho diário. Um sistema de anestesia rico em recursos e projetado ergonomicamente para ser posicionado com facilidade e usado por períodos prolongados sem passar por stress ou cansaço desnecessários.



Configurações mais fáceis com o touchscreen

- Ecrã de 10,4 polegadas de alta resolução
- Controle de toque rápido



Sistema respiratório integrado

- Alternância rápida entre ventilação manual e mecânica
- Alternância rápida entre o circuito de reinalação e não reinalação
- Recipiente de cal sodada transparente, nítido para observar e fácil de desmontar
- Módulo aquecido para evitar a monitorização do fluxo desviado por condensação e fornecer gás mais quente para os animais

Teste automático de vazamento

- Visualização do procedimento de teste com gráficos e tabelas
- Cálculo automático da taxa de vazamento de fluxo
- Recomendação por palavras e imagens para solução de problemas

Solução de eliminação de gás

- Solução opcional passiva ou ativa de eliminação de gases
- Reduz a poluição da operação

